


vitae Micro Therapy (R+NIR panel)

Použití

Pro optimální funkci doporučujeme aplikovat ze vzdálenosti alespoň 10 cm od těla na denní bázi (10 - 20 min. svícení na konkrétní místo) po dobu 3 měsíců. Následně je vhodné alespoň na 30 dní terapii pozastavit.

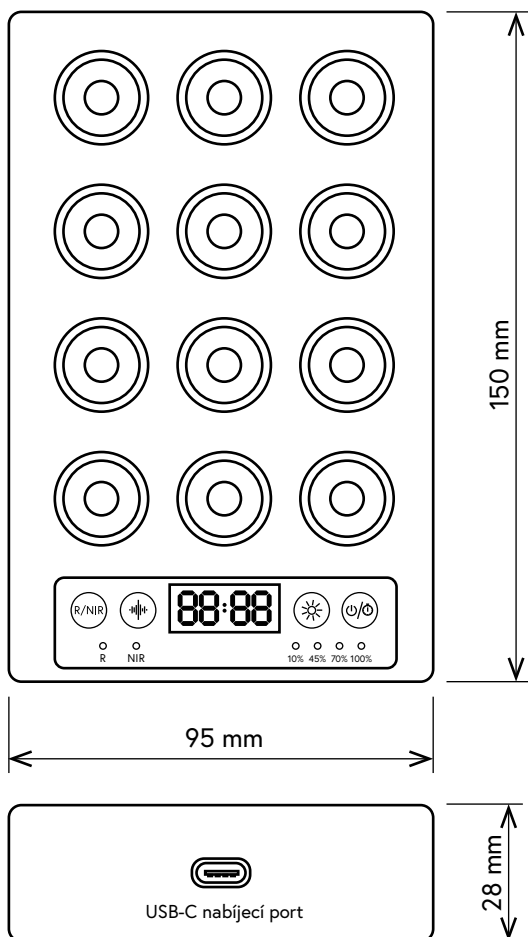

Obsah balení

skořepinové pouzdro
látkový obal
ochranné silikonové brýle
napájecí USB-A / USB-C kabel

nabíjecí adaptér není součástí balení

První spuštění

Před prvním spuštěním zařízení nabijte pomocí přiloženého kabelu. Pro první spuštění stiskněte tlačítko "vypínač/časovač".

Upozornění

Terapie není určena pro děti, osoby s rakovinou, těhotné ženy, osoby s kardiostimulátorem a epilepsií. Při používání používejte ochranné brýle a vždy se vyvarujte přímému pohledu do zdroje. Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od těla.

Péče a údržba

Před čištěním zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuto a odpojeno od nabíjecího adaptéru. K čištění panelu používejte navlhčený hadřík z mikrovlákná. Vyvarujte se aplikace vody přímo na zařízení a to zejména v oblasti chladících drážek pro ventilaci, LED čoček a konektoru USB-C. Zařízení není odolné vůči vodě, prachu a chemikáliím.

Ovládání



spektrum

výběr ze 3 světelných módů

úroveň 1: vypnuto

úroveň 2: RED

úroveň 3: NIR

úroveň 4: RED + NIR

RED - červené vlnové délky

NIR - blízké infračervené vlnové délky



pulzní režim

konfigurace frekvence pulzů (Hz)

0 - 9999 Hz



jas

konfigurace jasu (%)

úroveň 1: 25% výkonu

úroveň 2: 50% výkonu

úroveň 3: 75% výkonu

úroveň 4: 100% výkonu



vypínač/časovač

kliknutí - zapínání/vypínání přístroje

stisknutí ~3s - inicializace módu pro změnu minutky

rozpětí minutky 0 - 20 minut (rozlišení 1 minuta)

technické parametry

rozměry: 150 x 95 x 28 (mm)

hmotnost: 428 g

příkon: 12 x 5W

vstupní napětí: 5V / 2A DC

kapacita akumulátoru: 10 mAh

spektrální rozsah: 650 - 850 (nm)

limit teploty použití: 0°C - 40°C

limit relativní vlhkosti: 50 %

